

# PRIMA DNT



*MIKROSKOP FÜR  
ZAHNMEDIZIN,  
ORALCHIRURGIE  
ENDODONTIE UND  
ALLGEMEINE CHIRURGIE*

**LABOMED®**

ideas for vision




# SO GEHT DENTALMIKROSKOPIE HEUTE!

## **Modernste Geräte für Ihre Praxis.**

Die Dental-Mikroskope von LABOMED machen Ihnen das Arbeiten deutlich leichter und angenehmer. Sie erzielen wesentlich präzisere Untersuchungsergebnisse und garantieren Ihren Patienten eine hochqualitative Behandlung. Dafür sorgen modernste Geräte mit farbechten und kontrastreichen Visualisierungen, erstklassigen Optiken sowie einer außergewöhnlichen Ergonomie.

## **Dentalmikroskopie im Einsatz.**

Dental-Mikroskope kommen überwiegend in der restaurativen Zahnmedizin, der Endodontie, Implantologie und Parodontologie zum Einsatz. Für gelegentlich endodontisch tätige Zahnärzte sind die Dental-Mikroskope von LABOMED genauso geeignet und eine wirtschaftlich sehr interessante Lösung. Die Geräte erfüllen höchste Ansprüche und gewährleisten eine hohe Nachhaltigkeit in der Behandlung Ihrer Patienten.

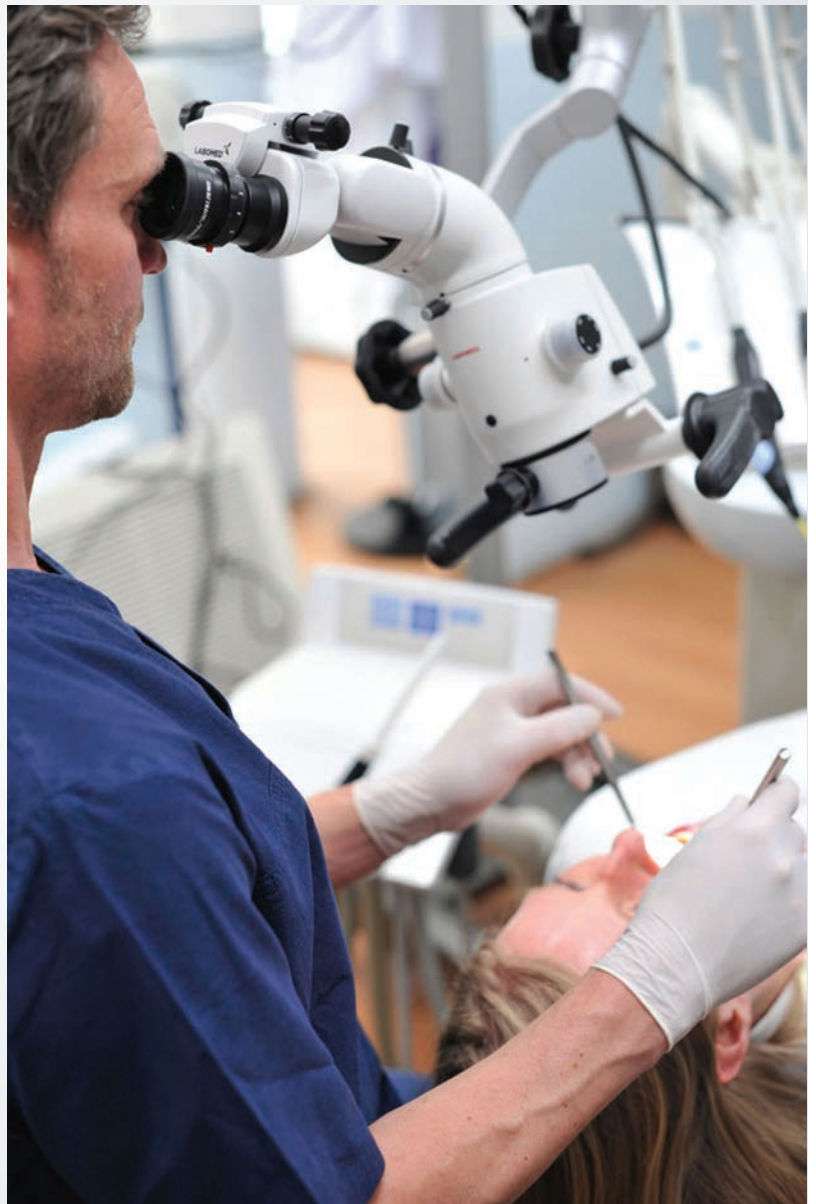



#### Warum LABOMED – Die Vorteile

-  Hohe Qualität
-  Innovative Technik
-  Überzeugender Service
-  Komfortable Bedienung
-  Überragendes Preis-Leistungsverhältnis

# TECHNIK

**Das LABOMED PRIMA DNT ist lieferbar auf einem Rollenstativ, als Wandversion, als Deckenmontage oder für die Montage an ANCAR-Stühlen und der Centro Säule von KaVo.**

## Technische Daten

Beleuchtung:	50 Watt HiPower LED Beleuchtung, 6mm Lichtwellenleiter, bis zu 60.000 Betriebsstunden, ca. 100.000 LUX Leistung
Vergrößerungswechsler:	5 Stufen: 0,4x, 0,6x, 1,0x, 1,6x und 2,5x
Tubus:	ergonomisch, binokular, schwenkbar von 0° bis 210° Augenabstand von 55-75 mm einstellbar, F = 170mm
Standardobjektiv:	f = 250mm (Wahlweise 300/400mm) mit man. Feintrieb und sterilisierbarer Kappe
Objektiverweiterung:	VarioFokus NuVar, MaxLite Coating mit einem Arbeitsbereich von 200 – 300mm variabler Arbeitsdistanz
Okulare:	Verschiebbare Okularringe (Brillenträger), +/- 5 Dioptrie einstellbar, Weitfeldokulare, Standard 10-fach
Mikroskopträger:	120° Kupplung und „Dental Carrier“
Mikroskopkopf:	ergonomisch verstellbare Handgriffe, Überzüge sterilisierbar, Orange- und Grünfilter
Aktionsradius:	Standard ca. 145 cm, Erweiterbar auf ca. 175 cm
Kopferweiterungen:	Rotationsadapter und 30° Extender (Ergopaket 1) um den Mikroskopkopf seitlich zu schwenken (je 30° seitlich)
Optikerweiterungen:	Strahlenteiler 0° und 30°, doppelseitig, HD Adapter für DSLR und Kompaktkameras (Ergopaket 2)
Montagearten:	Bodenstativ 60cm mit Softrollen und 2 Bremsen, Deckenstativ, Wandmontage, Centrosäule (KaVo), ANCAR Stühle
Standardzubehör:	Staubschutzhülle, Okularkappen, Komplettsset sterilisierbarer Kappen, Werkzeugsatz
Weiteres Zubehör: (optional)	Sterile OP Schutzhüllen, Okulare mit 12,5 facher Vergrößerung uvm.

# ERGONOMIE

## LED Beleuchtung

50 WATT HiPower LED Beleuchtung, 100.000 LUX Lichtleistung, farbneutral

## Drehbarer Mikroskopkopf

30° seitliches Schwenken durch Rotationsplatte

## Verstellbare Okularringe

Brillenträgereinstellung durch Eindrücken der Ringe, +/- 5 Dioptrie  
Individualeinstellung je Auge

## Feinfokus/ Variofokus

Standard: 250mm Objektiv mit Feinfokus  
Alternativ: Variofokus mit 100mm Arbeitstiefe

## Schwenkbarer Okularkopf

210° schwenkbarer Okularkopf für jede Sitz- und Stehposition

## Vergrößerungsfaktoren


5-facher Wechsler:  
4x 6x 10x 16x 25x

## Hygiene

Kappen und Griffe entfernen- und sterilisierbar

## Arbeitsfilter

Orange- und Grünfilter

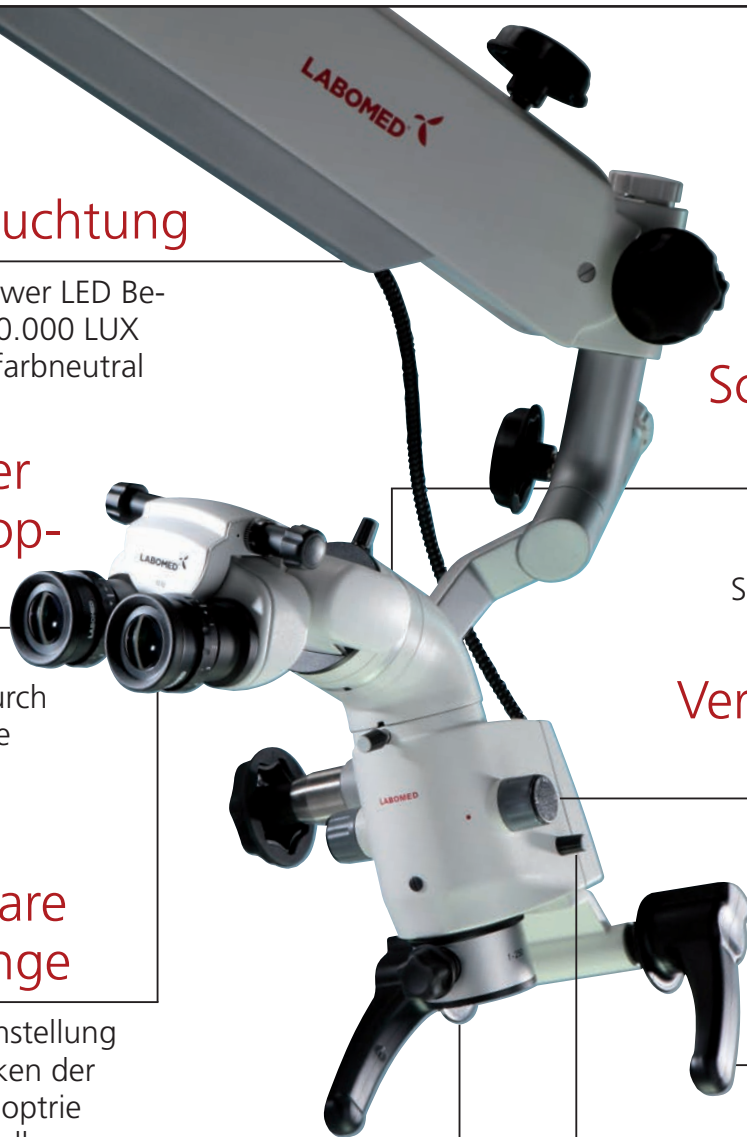

# DESIGN

*Beweglich und platzsparend: Entwickelt für höchste Ansprüche vereint das LABOMED Ergonomie, Funktionalität sowie eine top moderne und gleichzeitig schlichte Optik.*



## ästhetisch

Das LABOMED® PRIMA DNT setzt einen Akzent in Ihrer Praxis: Ohne überfrachtet zu sein, verfügt es über alle notwendigen Funktionen.

## repräsentativ

Ihre Patienten erkennen schon an der Optik: Hier wird mit höchsten Ansprüchen an Qualität und Nachhaltigkeit gearbeitet.

## integrierbar

LABOMED® fügt sich in die Praxis ein: Sie installieren es an Wand, Decke oder per Standfuß, an ANCAR Einheiten oder KAVO Centro-Säulen.

# WIRTSCHAFTLICHKEIT

Überzeugen Sie sich von den wirtschaftlichen Aspekten:



## Vorteil 1

Bei einem vergleichsweise günstigen Anschaffungspreis erhalten Sie modernste Technik und in der Grundausstattung alle für ein qualitativ hochwertiges Arbeiten notwendigen Elemente.

---



## Vorteil 2

Die Investitionskosten machen das LABOMED® PRIMA DNT auch für nur gelegentlich endodontisch behandelnde Ärzte attraktiv. Auch sie können nun hochqualitative Ergebnisse liefern.

---



## Vorteil 3

Mit LABOMED® setzen Sie auf Nachhaltigkeit und Langlebigkeit: Sie können das Mikroskop sukzessive erweitern und nachrüsten. Service und Ersatzteile sind über Jahrzehnte gesichert.

---



## Vorteil 4

Einmal angeschafft, reduzieren sich die laufenden Kosten für das LABOMED® PRIMA DNT auf Null. Dafür sorgen seine robuste Mechanik und die langlebige LED-Ausstattung.

---



## Vorteil 5

LABOMED steht für Wertbeständigkeit. Optische Geräte unterliegen nur einem sehr geringen Wert- oder Qualitätsverlust.

---

# HÄNDLER

## **bluemedic Medizintechnik ist Ihr exklusiver LABOMED-Partner für Deutschland**

Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Medizintechnik, insbesondere in der Optik, bietet **bluemedic** einen Rundum-Service:

- ✦ **Vertrieb und Konzeption**
- ✦ **Planung, Realisierung und Montage**
- ✦ **Schulung und Teamunterweisung**
- ✦ **Service und Support**

### **Sie treffen uns in 2018 auf folgenden Messen und Kongressen:**

- **17. März 2018:**  
Fortbildungsveranstaltung EAZF München: DH und Praxismanagerinnen  
**bluemedic** Infocounter EAZF Akademie, Fallstr. 34
- **14. April 2018:**  
id infotage dental BERLIN am Stand von I.C.LERCHER
- **20. bis 21. April 2018:**  
10. Fränkischer Zahnärztetag in WÜRZBURG  
**bluemedic** Stand Congress Centrum Würzburg (CCW)
- **29. bis 30. Juni 2018:**  
32. Oberpfälzer Zahnärztetag in REGENSBURG  
**bluemedic** Stand Uniklinikum Regensburg, Empore
- **08. September 2018:**  
id infotage dental DORTMUND am Stand von I.C.LERCHER
- **12. und 13. Oktober 2018:**  
Fachdental Südwest id infotage dental STUTTGART am Stand von I.C.LERCHER
- **20. Oktober 2018:**  
id infotage dental MÜNCHEN am Stand von I.C.LERCHER
- **01. bis 03. November 2018:**  
HNO Kongress MANNHEIM  
**bluemedic** Stand im Congress Center Rosengarten, gegenüber Otopront
- **09. und 10. November 2018:**  
id infotage dental FRANKFURT am Stand von I.C.LERCHER



LABOMED · I.C. LERCHER · EIZO medical

Hermann-Köhl-Str. 2a 93049 Regensburg  
Tel. 0941 57 200 Fax 0941 57 290  
info@bluemedic.de [www.bluemedic.de](http://www.bluemedic.de)



Thorsten vom Heu  
Vertrieb und Außendienst